

恒温层析柜系列

CONSTANT TEMPERATURE CHROMATOGRAPHY CABINET SERIES



CXG-1



CXG-2

主要技术参数 MAIN TECHNICAL PARAMETERS

型号	CXG-1	CXG-2
容积	250L	400L
温控范围	0~45℃	
显示方式	LED显示	
定时范围	无定时	
层析柱夹数量	单支	双支
工作环境温度	温度0~40℃，湿度≤85%	
电源电压	AC220V±10%；50HZ	
外形尺寸	600*623*1265mm	680*675*1720mm
重量	70KG	100KG

层析仪套装系列

CHROMATOGRAPH SET

自动核酸蛋白分离层析仪




MA99-1
普通型（六件套）



MA99-2
标准型（六件套）



MA99-2A
标准型（七件套）

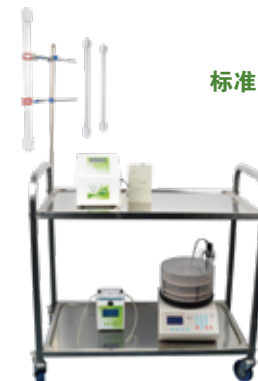

MA99-3
标准型（六件套）

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单），HL-2恒流泵；
BSZ-100自动部份收集器；HD-A色谱工作站；层析柱架；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长：254，280nm；
光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~10ml/min；
定时收集范围：1秒~24小时（数显）
试管收集容量：12ml×100；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单），HL-2S恒流泵；
SBS-100数控计滴自动部份收集器（液晶显示）；HD-A色谱工作站；层析柱架；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长：254，280nm；光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~10ml/min；
定时收集范围：1秒~200小时；
定滴收集范围：1~9999滴；
试管收集容量：12ml*100；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单），BT-100恒流泵；
BS-100A自动部份收集器（液晶显示）；
TH-500梯度混合器；HD-A色谱工作站；层析柱架；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长：254，280nm；光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~148ml/min；适用YZ15泵头，可配软管12#、14#、17#、19#；
定时收集范围：1秒~199小时59分59秒；
试管收集容量：12ml*100；给出梯度：1000ml；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

HD-21-1核酸蛋白检测仪（新型液晶屏，中文菜单）；
DHL-A电脑数显恒流泵；DBS-100电脑自动部份收集器（液晶显示）；
HD-A色谱工作站；仪器车；
层析柱： $\phi 1.0 \times 40$ ， $\phi 1.6 \times 50$ ， $\phi 2.6 \times 60$ 各一支
波长：254，280nm；
光程：3mm；
量程：六档细分；一键调T，同时显示A值；
流量：0.01~22ml/min；
定时收集范围：1秒~200小时；
定滴收集范围：1~9999滴；
定峰收集范围：0~100mv；
试管收集容量：12ml*100；
自配电脑可绘制层析图谱；数据分析，计算与保存；
系统要求：WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET



NEW

MA99-4
豪华型
(七件套)
(耐有机)

HD-4L电脑核酸蛋白检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单, 内置色谱工作站);
DHL-BN电脑数显恒流泵 (液晶显示, 中文菜单, 耐有机);
CBS-B程控多功能全自动部份收集器 (液晶显示);
TH-500A梯度混合器 (液晶显示, 耐有机); 仪器车; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.2 \times 40$ 一支 (耐有机)。
波长: 254, 280nm; 光程: 4mm; 流动样品池容积: 80ul;
量程: 0-100%T; A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
吸光度范围: 5-0.05 (八档量程细分检测); 层析分析时间: 不限制;
流量: 0.01-22ml/min; 定量范围: 0-9999ml或0-99.99L;
定时范围: 1秒-10小时; 休眠范围: 0秒-10小时; 给出梯度: 1000ml;
定时收集范围: 1秒-999小时59分59秒;
定滴收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml*100; 移动方式: X-Y, 可编程控制;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

自动液相色谱分离层析仪



MB99-1
普通型 (六件套)

HD-21-2紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), HL-2恒流泵;
BSZ-100自动部份收集器; HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm;
光程: 4mm; 量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01-10ml/min;
定时收集范围: 1秒-24小时 (数显)
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MB99-2
标准型 (六件套)

HD-21-2紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), HL-2S恒流泵;
SBS-100数控计滴自动部份收集器 (液晶显示); HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01-10ml/min; 定时收集范围: 1秒-200小时;
定滴收集范围: 1-9999滴;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MB99-2A
标准型 (七件套)

HD-21-2紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), BT-100恒流泵;
BS-100A自动部份收集器 (液晶显示);
TH-500A梯度混合器, HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01-148ml/min; 适用YZ15泵头, 可配软管12#、14#、17#、19#;
定时收集范围: 1秒-199小时59分59秒;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
给出梯度: 1000ml; 自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET



MB99-3
标准型
(六件套)

HD-21-2紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单);
DHL-A电脑数显恒流量; DBS-100电脑自动部份收集器(液晶显示);
HD-A色谱工作站; 仪器车;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值; 流量: 0.01-22ml/min;
定时收集范围: 1秒-200小时;
定滴收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



NEW

MB99-4
豪华型
(七件套)
(耐有机)

HD-5L电脑紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单, 内置色谱工作站);
DHL-BN电脑数显恒流泵 (液晶显示, 中文菜单, 耐有机);
CBS-B程控多功能全自动部份收集器 (液晶显示);
TH-500A梯度混合器 (液晶显示, 耐有机); 仪器车; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.2 \times 40$ 一支 (耐有机)。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 流动样品池容积: 80ul;
量程: 0-100%T; A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
吸光度范围: 5-0.05 (八档量程细分检测); 层析分析时间: 不限制;
流量: 0.01-22ml/min; 定量范围: 0-9999ml或0-99.99L;
定时范围: 1秒-10小时; 休眠范围: 0秒-10小时; 给出梯度: 1000ml;
定时收集范围: 1秒-999小时59分59秒;
定滴收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml*100; 移动方式: X-Y, 可编程控制;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

自动核酸蛋白分离层析仪 (组合式)



MC99-2 标准型
(组合式)
(中文显示)

组合配置: 核酸蛋白检测仪, 数显恒流泵;
自动部份收集器; 梯度混合仪, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 254, 280nm; 光程: 3mm;
量程: 六档细分; A/T启动自动检测校准: T=100%, A=0.10000
流量: 0.01-148ml/min; 配置YZ15泵头; 适用12#、14#、17#、19#软管;
定时收集范围: 1秒-199小时59分59秒; 试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
给出梯度: 1000ml; 自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

自动液相色谱分离层析仪 (组合式)



MC99-3 豪华型
(组合式)
(中文显示)

组合配置: 紫外检测仪, 数显恒流泵, 电脑全自动部份收集器 (液晶显示);
梯度混合器, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 八档细分; A/T启动自动检测校准: T=100%, A=0.10000
流量: 0.01-148ml/min; 配置YZ15泵头; 适用12#、14#、17#、19#软管;
定时收集范围: 1秒-199小时59分59秒; 定滴收集范围: 1-9999滴;
定峰收集范围: 0-100mv; 试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
给出梯度: 1000ml; 自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET

自动液相色谱分离层析仪



MD99-1
普通型 (六件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), HL-2数显恒流泵;
BSZ-100自动部份收集器, HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01 – 10ml/min;
定时收集范围: 1秒 – 24小时 (数显);
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MD99-2
标准型 (六件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), HL-2S数显恒流泵;
SBS-100数控计滴自动部份收集器 (液晶显示);
HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01 – 10ml/min; 定时收集范围: 1秒 – 200小时;
定滴收集范围: 1–9999滴; 试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MD99-2A
标准型 (七件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单);
BT-100恒流泵, BS-100A自动部份收集器 (液晶显示);
TH-500梯度混合器, HD-A色谱工作站; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01 – 148ml/min; 适用YZ15泵头,
可配软管12#、14#、17#、19#;
给出梯度: 1000ml; 定时收集范围: 1秒 – 199小时59分59秒;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MD99-3
标准型 (六件套)


HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单);
DHL-A电脑数显恒流泵; DBS-100电脑全自动部份收集器 (液晶显示);
仪器车, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支
波长: 220, 254, 280, 340nm;
光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01 – 22ml/min;
定时收集范围: 1秒 – 200小时;
定滴收集范围: 1–9999滴;
定峰收集范围: 0–100mv;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET




MD99-4
豪华型 (六件套) (耐有机)
(彩色触摸屏电脑内置色谱工作站)

HD-5T电脑紫外检测仪 (新型10.1寸触摸式平板电脑, 内置: 色谱工作站); DHL-BN电脑数显恒流泵; CBS-100程控多功能全自动部份收集器 (液晶显示); TH-500A梯度混合器 (液晶显示, 耐有机); 仪器车;
层析柱: $\phi 1.2 \times 40$ 一支 (耐有机)。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 流动样品池容积: 80ul;
量程: 0 – 100%T; A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
滤光片: 前置拨盘式调换;
吸光度范围: 5–0.05 (八档量程细分检测);
层析分析时间: 不限制;
流量: 0.01 – 22ml/min; 定量范围: 0 – 9999ml或0 – 99.99L;
定时范围: 1秒 – 10小时; 休眠范围: 0秒 – 10小时; 给出梯度: 1000ml;
定时收集范围: 1秒 – 999小时59分59秒;
定滴收集范围: 1–9999滴; 定峰收集范围: 0–100mv;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100; 移动方式: X–Y, 可编程控制;
特点: 可直接在软件上绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;

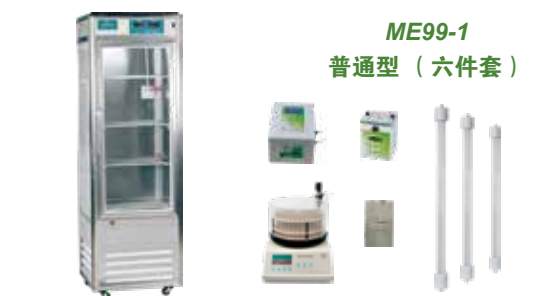

ME99-1
普通型 (六件套)

HD-21-2紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单); HL-2恒流泵;
BSZ-100自动部份收集器;
CXG-1电脑层析柜, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01–10ml/min; 定时收集范围: 1秒 – 24小时 (数显);
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
层析柜容积: 250L, 温控范围: 0–45°C;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

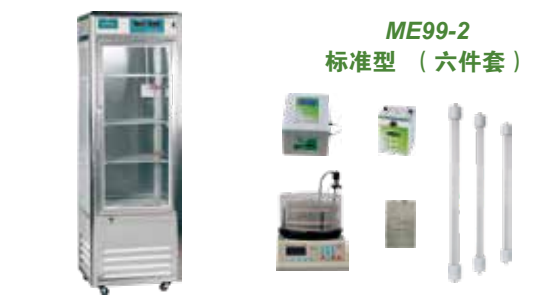

ME99-2
标准型 (六件套)

HD-21-2紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单), HL-2S恒流泵;
SBS-100数控计滴自动部份收集器 (液晶显示);
CXG-1电脑层析柜, HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流量: 0.01–10ml/min; 定时收集范围: 1秒 – 200小时;
定滴收集范围: 1–9999滴; 试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
层析柜容积: 250L, 温控范围: 0–45°C;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



ME99-2A
标准型 (六件套)

HD-5电脑紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单); BT-100恒流泵;
BS-100A自动部份收集器 (液晶显示);
梯度混合器TH-500A, CXG-1电脑层析柜;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值; 内置色谱工作站;
流量: 0.01–148ml/min; 适用YZ15泵头,
可配软管: 12#、14#、17#、19#; 定时收集范围: 1秒 – 199小时59分59秒;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100; 给出梯度: 1000ml;
层析柜容积: 250L, 温控范围: 0–45°C;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET



ME99-3
豪华型 (六件套)

HD-3紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单),
DHL-A电脑数显恒流泵, DBS-100电脑自动部份收集器(液晶显示);
CXG-1电脑层析柜; HD-A色谱工作站;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 0-100%T, 0-2A; 内置色谱工作站;
流量: 0.01-22ml/min; 定时收集范围: 1秒-200小时;
滴定收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 1-100mv;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100;
层析柜容积: 250L, 温控范围: 0-45°C;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



ME99-4
豪华型 (七件套)
(耐有机)

HD-5L电脑紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单, 内置色谱工作站);
DHL-BN电脑数显恒流泵, CBS-B程控多功能全自动部份收集器(液晶显示);
TH-500A梯度混合器 (耐有机), CXG-2电脑层析柜; 层析柱架
层析柱: $\phi 1.2 \times 40$ 一支 (耐有机)。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 流动样品池容积: 80ul;
量程: 0-100%T; A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
吸光度范围: 5-0.05 (八档量程细分检测); 层析分析时间: 不限制;
流量: 0.01-22ml/min; 定量范围: 0-9999ml或0-99.99L;
定时范围: 1秒-10小时; 休眠范围: 0秒-10小时; 给出梯度: 1000ml;
温控范围: 0-45°C, 层析柜容积: 400L; 定时收集范围: 1秒-999小时59分59秒;
定滴收集范围: 1-9999滴; 定峰收集范围: 0-100mv;
试管收集容量: 12ml $\times$ 100; 移动方式: X-Y, 可编程控制;
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。



MF99-1
普通型 (七件套)

HD-5电脑紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单, 内置色谱工作站),
HL-2恒流泵; CBS-A程控全自动部分收集器; TH-500梯度混合器;
组装台式电脑; 层析柱架; 层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值; 内置色谱工作站;
流量: 0.01-10ml/min; 给出梯度: 1000ml;
定时范围: 1秒-999小时59分59秒; 定滴收集范围: 1-9999滴;
程控收集范围: 1-10段; 移动方式: X-Y移动, 可编程程序控制 (带废液槽);
试管收集容量: 可自行选配 (5ml/12ml/50ml/100ml/外接容器无限量);
电脑配置: 组装台式电脑 (标配)
安装软件可在电脑上绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;



MF99-2
标准型 (七件套)


HD-5电脑紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单, 内置色谱工作站),
HL-2S数显恒流泵; CBS-A程控全自动部分收集器, TH-500A梯度混合器,
品牌台式电脑; 层析柱架;
层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源;
量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值; 内置色谱工作站;
流量: 0.01-10ml/min; 给出梯度: 1000ml;
定时范围: 1秒-999小时59分59秒; 定滴收集范围: 1-9999滴;
程控收集范围: 1-10段; 移动方式: 移动方式: X-Y移动, 可编程程序控制 (带废液槽);
试管收集容量: 可自行选配 (5ml/12ml/50ml/100ml外接容器无限量);
电脑配置: 品牌台式电脑 (标配)
安装软件可在电脑上绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET




MF99-3
豪华型 (七件套) (耐有机)

HD-5电脑紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单, 内置色谱工作站),
BT-100N恒流泵; CBS-B程控全自动部分收集器; TH-1000A梯度混合器;
仪器车; 品牌笔记本电脑; 层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 220, 254, 280, 340nm; 光程: 4mm; 进口紫外光源; 量程: 六档细分;
一键调T, 同时显示A值; 内置色谱工作站; 流量: 0.01-148ml/min;
适用YZ15泵头, 给出梯度: 2000ml; 可配软管: 12#, 14#, 17#, 19#;
定时范围: 1秒-999小时59分59秒; 定滴收集范围: 1-9999滴; 程控收集范围: 1-10段;
定峰收集范围: 0-2000mv; 移动方式: X-Y移动, 可编程程序控制 (带废液槽);
试管收集容量: 可自行选配 (5ml/12ml/50ml/100ml/外接容器无限量);
电脑配置: 品牌笔记本电脑 (标配)
安装软件可在电脑上绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;

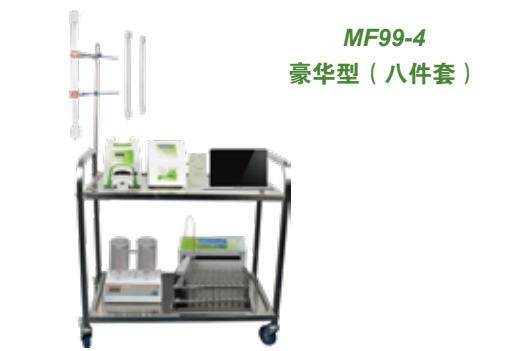


MF99-4
豪华型 (八件套)

HD-6高灵敏度紫外检测仪 (新型液晶屏, 中文菜单); BT-100SD恒流泵;
CBS-B程控全自动部分收集器; TH-1000A梯度混合器; 仪器车; HD-A色谱工作站;
品牌笔记本电脑; 层析柱: $\phi 1.0 \times 40$, $\phi 1.6 \times 50$, $\phi 2.6 \times 60$ 各一支。
波长: 214, 254nm (标配); 进口紫外光源, 可选配214-380nm波长;
光程: 10mm; 样品池: 100ul; 量程: 六档细分; 一键调T, 同时显示A值;
流速: 10ml/min; 最小检测量: 50ug/ml; 稳定时间: <20min;
基线漂移: $\leq \pm 1.0 \times 10^{-3}$ Au/h; 给出梯度: 2000ml; 流量: 0.15-324ml/min;
适用YZ25泵头, 可配软管: 18#, 20#, 22#, 25#; 定时范围: 1秒-999小时59分59秒;
定滴收集范围: 1-9999滴; 程控收集范围: 1-10段; 定峰收集范围: 0-2000mv;
移动方式: X-Y移动, 可编程程序控制 (带废液槽);
试管收集容量: 可自行选配 (5ml/12ml/50ml/100ml/外接容器无限量);
电脑配置: 品牌台式电脑 (标配)
安装软件可在电脑上绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;

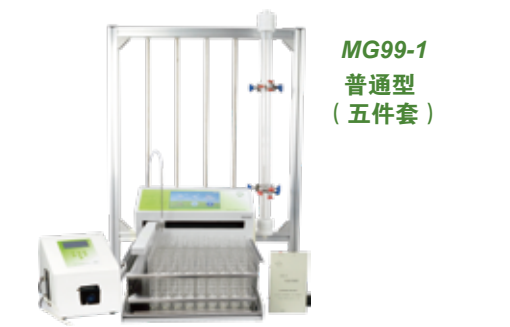

MG99-1
普通型 (五件套)

HDB-6高灵敏度紫外检测仪 (LCD显示), CBS-A程控自动部份收集器;
HD-A色谱工作站, 中压层析柱: $\phi 1.2 \times 40$; 台式层析柱支架1套。
波长: 214, 254 (标配); 可选配波长: 214-380nm; 光程: 10mm;
样品池: 100ul; 量程: 0-100%T; A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
吸光度范围: 5-0.05 (八档量程细分检测);
流速: 10ml/min; 最小检测量: 50ug/ml; 稳定时间: <20min;
基线漂移: $\leq \pm 1.0 \times 10^{-3}$ Au/h; 流量: 0.006-20ml/min;
定时范围: 1秒-999小时59分59秒; 定滴收集范围: 1-9999滴;
程控收集范围: 1-10段; 移动方式: X-Y移动, 可编程程序控制 (外接废液槽);
收集容量: 可选配 (5ml/12ml/50ml/100ml/外接容器无限量)
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

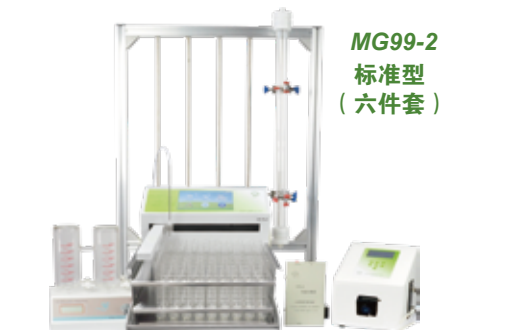

MG99-2
标准型 (六件套)

HDB-6高灵敏度紫外检测仪 (LCD显示); CBS-B程控自动部份收集器;
TH-300A梯度混合器; HD-A色谱工作站; 中压层析柱: $\phi 1.2 \times 40$;
台式层析柱支架1套。波长: 214, 254 (标配); 可选配波长: 214-380nm;
光程: 10mm; 样品池: 100ul; 量程: 0-100%T;
A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
吸光度范围: 5-0.05 (八档量程细分检测); 流速: 10ml/min; 最小检测量: 50ug/ml;
稳定时间: <20min; 基线漂移: $\leq \pm 1.0 \times 10^{-3}$ Au/h; 流量: 0.006-20ml/min;
定时范围: 1秒-999小时59分59秒; 定滴收集范围: 1-9999滴;
程控收集范围: 1-10段; 定峰收集范围: 0-2000mv;
移动方式: X-Y移动, 可编程程序控制 (外接废液槽); 给出梯度: 600ml;
收集容量: 可选配 (5ml/12ml/50ml/100ml/外接容器无限量)
自配电脑可绘制层析图谱; 数据分析, 计算与保存;
系统要求: WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8操作系统。

层析仪套装系列 CHROMATOGRAPH SET



**MG99-3
豪华型
(八件套)**

HDB-6高灵敏度紫外检测仪 (LCD显示) ; CBS-B程控自动部份收集器;
TH-500A梯度混合器; HD-A色谱工作站; 仪器车; 品牌电脑;
中压层析柱: $\phi 1.2 \times 40$; 台式层析柱支架1套。
波长: 214, 254 (标配); 可选配波长: 214-380nm; 光程: 10mm;
样品池: 100ul; 量程: 0-100%T; A/T%启动自动检测校准: T=100%, A=0.0000;
吸光度范围: 5-0.05 (八档量程细分检测); 流速: 10ml/min; 最小检测量: 50ug/ml;
稳定时间: <20min; 基线漂移: $\leq \pm 1.0 \times 10^{-3}$ Au/h; 流量: 0.006-20ml/min;
定时范围: 1秒-999小时59分59秒; 定滴收集范围: 1-9999滴;
程控收集范围: 1-10段; 定峰收集范围: 0-2000mv;
移动方式: X-Y移动,可编程序控制 (外接废液槽); 给出梯度: 1000ml;
收集容量:可选配 (5ml/12ml/50ml/100ml/外接容器无限量)
电脑配置: 品牌笔记本电脑 (标配)
安装软件可在电脑上绘制层析图谱;数据分析,计算与保存;

配套仪器系列

SUPPORTING INSTRUMENT SERIES



YQC-2



**普通,中压,
水冷夹套层析柱**



中压层析柱、座架

主要技术参数 MAIN TECHNICAL PERAMETERS

产品名称	型号	外形尺寸	主要技术参数	重量 (KG)
不锈钢仪器车	YQC-2	800×500×900	双层万向轮; 配层析柱支架; 层析柱夹子。	10

配件系列 ACCESSORIES SERIES



DG-4



DG-8



GY315



HL-2



HL-2S



YZ15(pps)



YZ15



YZ25

● 恒流泵泵头: 适用多种规格软管; 更换简单快捷, 结构紧凑合理, YZ15,YZ25可实现多个泵头串联使用; PPS材质泵壳耐有机溶剂和其他防腐蚀液体, 坚固耐用。



● 恒流泵硅胶管: 标准配置软管采用进口硅橡胶原材料, 白金硫化生产工艺; 具有无毒、生理惰性、耐高低温、耐紫外线、透明度高、回弹力强, 耐压缩永久变形等优点。可广泛应用与制药、生物工程、分子生物学、精细化工、环保、食品加工等多种领域的科研和生产。

特点: Characteristic

优异的耐候性和耐热老化性; 耐酸碱和耐有机溶剂稍差。

软管 截面 (比例 1:1)									
外径	3.8	3.2	4.8	4.2	5	5.7	6.3	6.1	6.8

软管 截面 (比例 1:1)									
外径	7	8	8.6	9	11	16	15	16	20

● 梯度杯体: 有机玻璃杯体采用优质的透明有机玻璃管, 经过人工切割, 研磨, 抛光等诸多工序而完成, 适用于各种水溶剂的混合, 不适应各种有机溶剂。

玻璃杯体采用特殊工艺制成, 易碎, 优点适用于各种有机溶剂的混合搅拌

